



**PHARMED**  
Medical Industries  
صایم پزشکی  
**فارمد**



**PHARMED**  
Medical Industries  
صنایع پزشکی  
**فارمد**



CE 2195  
**SZUTEST**



## شرکت صنایع پزشکی فارمد

عضو کنسرسیوم دیالیز ایران

### تولید محصولات مصرفی دیالیز و محصولات پزشکی استراتژیک

شرکت صنایع پزشکی فارمد در سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با استفاده از دانش و تجربیات شرکت‌های پیشروی جهان، تولید ملزومات مصرفی و عرضه داروهای دیالیز را در این مجموعه عهده‌دار است. به کارگیری آخرین فناوری‌های روز دنیا برای ارتقای کیفی محصولات خط مشی پایدار این شرکت بوده است.

شرکت فارمد در تولید محصولات یکارمصرف دیالیز از جمله کیسه و کارتريج پودر بیکربنات سدیم، ست لوله‌های رابط دیالیز اطفال و بزرگسال در مدل‌های مختلف، سوزن فیستولا، محلول همودیالیز و همچنین برخی محصولات استراتژیک و مورد نیاز کشور نظیر کیسه خون، کیسه فصد و ست هموکانسنتریشن برای اطفال و بزرگسالان فعالیت می‌کند.

صنایع پزشکی فارمد با پیاده‌سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای EN ISO 13485، بهره‌گیری از دانش فنی و استفاده از مواد اولیه مرغوب، گام بزرگی در ارتقای کیفیت این محصولات برداشته و موفق به اخذ نشان CE اروپا، برای اکثر محصولات خود شده است.

## سوزن فیستولا نیدل شریانی /وریدی (Fistula Needle Set Arterial/Venous)

از آنجا که سوزن فیستولا در تماس مستقیم با بدن بیمار است، نقش مهمی در کاهش درد بیمار دارد. شرکت صنایع پزشکی فارمد، تنها تولیدکننده سوزن فیستولا در سه گیج مختلف ۱۵، ۱۶ و ۱۷ است. مهم‌ترین مزایای سوزن‌های تولید صنایع پزشکی فارمد عبارتند از:

- برش اریب و کاملاً صیقلی قسمت برنده و تیز
- شبیکنواخت و بدون زاویه در نوک سوزن
- چشم پشتی بیضی شکل و بزرگ در سوزن‌های شریانی که موجب:
  - حداکثر جریان خون
  - حداقل آسیب به پوست بیمار
- دیواره فوق العاده نازک که موجب:
  - افزایش جریان خون
  - حداقل آسیب به پوست بیمار
- پوشش سیلیکونی که موجب:
  - حرکت روان و راحت در رگ بیمار
  - کاهش آسیب و درد بیمار
- کلمپ‌های شریانی و وریدی با درجه سختی استاندارد و کدگذاری رنگی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید غیر تب زا و غیر سمی
- دارای نشان CE 2195
- محصولات فیستولانیدل بدون فتالات (DEHP) می‌باشد.



نام محصول	گیج	کدمحصول	تعداد در هر کارتون	نوع باله	رنگ باله	محافظ سوزن	طول تیوب (mm)	طول سوزن (mm)
سوزن فیستولا وریدی	۱۵	۴۲۱۸۳۶۴	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا شریانی	۱۵	۴۲۱۸۳۶۶	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا وریدی	۱۶	۴۲۱۸۳۴۲	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا شریانی	۱۶	۴۲۱۸۳۴۰	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا وریدی	۱۷	۴۲۱۸۳۵۶	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا شریانی	۱۷	۴۲۱۸۳۵۴	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا شریانی - وریدی	۱۵	۴۲۱۸۳۸۴	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا شریانی - وریدی	۱۶	۴۲۱۸۳۰۲	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵
سوزن فیستولا شریانی - وریدی	۱۷	۴۲۱۸۳۵۹	۱۸۰	چرخان		ندارد	۱۵۰	۲۵

## ست لوله رابط دیالیز (Blood Line Set)



- مطابق با استاندارد 2 - BS EN ISO 8637
- ساخته شده از مواد پلاستیکی شفاف و بدون واکنش سیتوتوکسیک
- طراحی ارگونومیک، با اتصالات ساده و ایمن
- کدگذاری رنگی قطعات
- طراحی هندسی خاص چمبر وریدی
- دارای تعداد کافی کلمپ با کدگذاری رنگی
- دارای کلمپ در قسمت انفوژین هپارین
- دارای محافظه ترانسدیوسر
- قابلیت اندازه‌گیری کارایی فیستول در ست‌های استاندارد و ست اطفال
- سنس فشار خون شریانی، قبل از پمپ در لوله‌های رابط دیالیز استاندارد مدل SB, SG, SF
- دارای کیسه‌ی جمع‌آوری محلول پرایم در لوله‌های رابط دیالیز استاندارد مدل SF,SB,SG
- سنس فشار خون شریانی قبل و بعد از پمپ در مدل SB
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید غیر تب‌زا و غیر سمی
- دارای نشان CE 2195 برای مدل‌های SU, SF, SB, SG

- مدل HDF Online AV-Set دارای سیف لاین، درمان Hemodiafiltration مناسب برای دستگاه BBraun dialog<sup>+</sup> HDF Online.
- شرکت صنایع پزشکی فارمدو اولین و تنها تولید کننده‌ی ست بلادلاین اطفال و HDF Online AV-Set در کشور می‌باشد.
- ست بلادلاین اطفال دارای سنس فشار خون شریانی قبل از پمپ و قابل استفاده برای تمامی دستگاه‌های دیالیز
- محصولات بلادلاین اطفال (Pediatric AV-Set) بدون فتالات (DEHP) می‌باشد.

**مشخصات ست بلادلاین**

مدل ست بلادلاین	کد محصول	ابعاد پمپ سگمنت			حجم مسیر خونی (±%10) ml	
		قطر خارجی (mm)	قطر داخلی (mm)	طول (mm)	مسیر وریدی	مسیر شریانی
Blood line Set, SU	۴۲۱۲۲۰۰	۹.۸	۶.۵	۳۸۰	۶۲	۸۲
	۴۲۱۲۲۰۴					
Blood line Set, SF	۴۲۱۲۲۲۲	۹.۸	۶.۵	۳۸۰	۶۵	۸۲
Blood line Set, SF With drain bag	۴۲۱۲۲۲۰				۷۶	
Blood line Set, SB	۴۲۱۲۲۱۲	۹.۸	۶.۵	۳۴۰	۷۴	۸۲
Blood line Set, SB With drain bag	۴۲۱۲۲۱۴					
Blood line Set, SG	۴۲۱۲۲۱۶	۱۲.۰	۸.۰	۳۸۰	۶۲	۹۰
Blood line Set, SG With drain bag	۴۲۱۲۲۱۹					
Arterial line, SF	۴۲۱۲۲۳۸	۹.۸	۶.۵	۳۸۰	-	۸۲
Venous line, SF	۴۲۱۲۲۳۹	-	-	-	۶۵	-
HDF Online AV-Set	۴۲۱۲۲۳۴	۱۲.۰	۸.۰	۳۴۰	۷۰	۹۰
Pediatric AV-Set	۴۲۱۲۲۵۰	۹.۸	۶.۵	۳۴۰	۴۲	۵۲

SF( For Fresenius machines and suitable for all machines)

SG( For For Gambro Machines)

SB( For B/Braun Machines)

SU and Pediatric AV-set suitable for all machines

HDF(for BBraun dialog<sup>+</sup> HDF online machines)

## کارتریج و کیسه پودر بی کربنات سدیم RenaBag , RenaBag S , RenaCart, RenaCart B

شرکت صنایع پزشکی فارمد تولید کننده کارتریج (رناکارت و رناکارت بی) و کیسه (رنابگ و رنابگ اس) حاوی پودر بی کربنات می باشد.

- تولید با فناوری روز دنیا
- پودر بی کربنات سدیم منطبق با استانداردهای Eur.Ph, BP, USP
- شفافیت، سبکی، انعطاف‌پذیری و فضای کم برای نگهداری (استفاده از فیلم‌های PE/PA در ساخت بدنه رنابگ و رنابگ اس)
- جلوگیری از آلودگی محیط با استفاده از درپوش برای درگاه ورودی و خروجی رناکارت واستفاده از کیسه بسته بندی پلاستیکی برای محصول رناکارت بی
- سازگار با محیط زیست
- مناسب برای حداکثر ۵ ساعت دیالیز با سرعت ۵۰۰ ml/min
- جلوگیری از ورود پودر غیر محلول به دستگاه دیالیز با به کار گیری فیلتر با مش مناسب
- دارای نشان CE 2195 (رناکارت، رنابگ، رنابگ اس)
- رناکارت بی مناسب برای دستگاه دیالیز JMS



رناکارت

رنابگ اس

رنابگ

رناکارت بی

نام محصول	کد محصول	مواد اولیه کارتریج / کیسه	تعداد در هر کارتن	سرعت جریان دیالیز
رنابگ ۵۵۰ گرم	۴۳۱۵۲۰۵	PA/PE	۱۶	۵۰۰ ml/ min
رنابگ ۶۵۰ گرم	۴۳۱۵۲۱۰			
رنابگ ۷۵۰ گرم	۴۳۱۵۲۳۰			
رنابگ اس ۵۵۰ گرم	۴۳۱۵۲۱۵			
رنابگ اس ۶۵۰ گرم	۴۳۱۵۲۲۰			
رنابگ اس ۷۵۰ گرم	۴۳۱۵۲۴۰			
رناکارت ۵۵۰ گرم	۴۳۱۵۳۰۵	PP	۱۰	
رناکارت ۶۵۰ گرم	۴۳۱۵۳۱۰			
رناکارت ۷۵۰ گرم	۴۳۱۵۳۱۵			
رناکارت بی ۵۵۰ گرم	۴۳۱۵۳۱۶	PE	۱۰	
رناکارت بی ۶۵۰ گرم	۴۳۱۵۳۱۴			
رناکارت بی ۷۵۰ گرم	۴۳۱۵۳۱۸			

## محلول همودیالیز (Concentrated Hemodialysis Acidic Solution)

محلول‌های همودیالیز منطبق با استانداردهای BP، Eur.Ph، USP، FDA تولید می‌شود.  
 با توجه به تولید انواع مختلف محلول‌های همودیالیز، براساس شرایط بالینی بیمار، امکان انتخاب محلول مناسب وجود دارد.

انواع محلول‌های همودیالیز اسیدی

- محلول اسیدی I مناسب برای بیماران هایپرکالمی و خیم
- محلول اسیدی II مناسب برای عموم بیماران همودیالیزی
- محلول اسیدی III مناسب برای بیماران هیپوکالمی و مبتلا به نارسایی قلبی و مصرف کننده دیگوکسین



نام محصول	حجم (لیتر)	بسته‌بندی	کد محصول
محلول اسیدی غلیظا	۵	۲ گالن	۴۳۱۶۲۰۵
محلول اسیدی غلیظا	۵	۲ گالن	۴۳۱۶۲۱۰
محلول اسیدی غلیظا	۵	۲ گالن	۴۳۱۶۲۱۵

## کیسه‌های خون (Blood Bags)

کیسه خون یکی از محصولات استراتژیک کشور است که برای جمع آوری و انتقال خون و نیز جهت فرآورده‌های خونی چون پلاسما، گلبول قرمز، پلاکت و سایر اجزای خونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دنبال مطالعات وسیع کارشناسی و امکان‌سنجی فنی، از سال ۱۳۹۳ تولید انواع کیسه‌های خون در شرکت صنایع پزشکی فارمد آغاز شد. به پشتوانه کوشش‌های واحد تحقیق و توسعه فارمد و انتقال دانش فنی از تولیدکنندگان ممتاز جهان، طراحی کیسه خون با قابلیت جمع آوری، نگهداری، انتقال، جداسازی و تزریق خون و اجزای تشکیل‌دهنده آن محقق شده است.

کیسه خون تولید فارمد به عنوان یک محصول پزشکی حیاتی، مطابق با استانداردهای EN ISO 3826-1، EN ISO 3826-3 و در شرایط کاملاً بهداشتی و ایمن تولید می‌شود. این محصولات از نظر عملکرد با سمت انتقال خون سازگارند. کیسه‌های خون، سترون، غیر سمی و عاری از مواد تبزا و از جنس پلیمر منعطف هستند که حاوی محلول ضد انعقاد و یا نگهدارنده‌اند. علاوه بر آن، کیسه‌های خون همراه با کیسه‌های کوچک جانبی متصل به آن کلیه ویژگی‌های لازم برای جداسازی پلاکت از خون کامل، بدون هیچ‌گونه آلودگی را مقدور می‌سازد.

فارمد طیف متنوعی از کیسه‌های خون مناسب با نیازهای سازمان انتقال خون را تولید می‌کند. این محصولات بر اساس نوع کاربری و نیاز در انواع مختلف: تکی، دوتایی، سه تایی و چهارتایی در حجم‌های مختلف ۴۵۰ و ۳۵۰ میلی‌لیتر تولید می‌شوند. تمامی مدل‌های مختلف کیسه‌های خون تولیدی این شرکت همراه با کیسه‌های نمونه‌گیری خون و محافظ سوزن می‌باشد.

### ویژگی‌های کیسه‌های خون

کیسه‌های خون یکبار مصرف هستند و در دو گونه ضد انعقاد زیر عرضه می‌شوند:

- ۱- کیسه خون با محلول ضد انعقاد CPDA-1 استریل شده
- ۲- کیسه خون با محلول ضد انعقاد CPD استریل شده

#### روش استریلیزاسیون

کیسه‌های خون به شیوه بخار (اتوکلاو) استریل می‌شوند.

#### انطباق با استانداردها

ISO 3826

BP, Eur.Ph, USP

دارای نشان CE 2195

درج شماره سریال روی تیوب اصلی کیسه خون با استفاده از لیزر





## مشخصات کلی (قطعات و مواد اولیه)

### محلول ضد انعقاد

مدت زمان نگهداری خون در محلول‌های ضد انعقاد CPD و CPDA-1 به ترتیب ۲۱ و ۳۵ روز است.

### مواد پلاستیکی و پلیمری

کیسه‌های جمع‌آوری و جانبی از PVC با DEHP ساخته شده‌اند. کیسه‌های نگهداری پلاکت دارای نرم‌کننده TOTM هستند که با خاصیت نفوذ پذیری نسبت به گازهای اکسیژن و دی‌اکسید کربن، امکان نگهداری پلاکت تا ۵ روز را فراهم می‌کنند. کیسه‌ها به گونه‌ای حالت برجستگی دارند که از چسبیدن کیسه‌ها به یکدیگر در حین استریل جلوگیری می‌کند، گوشه‌های گرد کیسه خون میزان از دست رفتن اجزای خون را در حین انتقال کاهش می‌دهد. برای سهولت مانیتورینگ در طول خون گیری و انتقال، از مواد و کیسه‌های شفاف و با کیفیت بالا استفاده می‌شود که دارای درجه پزشکی و بدون پارتیکل هستند.



### سوزن و محافظ سوزن

- دیواره بسیار نازک سوزن سیلیکونیزه شده
- کاهش درد و استرس اهداکننده خون
- محافظ ایمنی، ایمنی کاربر و درمان را با محافظت کردن از جراحات سوزن بهبود می‌بخشد.



### کیسه نمونه‌گیری و متعلقات آن

کیسه نمونه‌گیری برای جمع‌آوری خون اولیه از اهداکننده خون استفاده می‌شود و از آلودگی ناشی از باکتری‌های طبیعی پوست جلوگیری می‌کند. این کیسه‌ها حداقل ۳۵ میلی لیتر خون را انتقال می‌دهد. همچنین لوله جمع‌آوری خون، امکان انجام چندین نمونه‌گیری با استفاده از تیوب‌های وکیوم را ممکن می‌سازد.



## برچسب‌گذاری و بسته‌بندی

شرکت فارمد به منظور استفاده از سیستم بارکد، شناسایی و ردیابی سیستماتیک کیسه‌های خون، به عنوان عضو شورای بین‌المللی اشتراک در اتماسیون بانک خون (ICCBBA) ثبت شده است.


### مشخصات برچسب

- سهولت برای نگارش بر روی آن
- دارای نشانه بازشدگی (Tamper evident)
- مقاوم در برابر پارگی، آب و سانتریفیوژ
- واضح و خوانا
- تبعیت از سیستم بارکد مطابق با ISBT 128




## بسته بندی

بسته بندی اولیه: پلی اتیلن/پلی پروپیلن (PP/PET)  
بسته بندی ثانویه: آلومینیوم/پلی اتیلن (Al/PET)  
کاهش از بین رفتن رطوبت، محافظت محصول در برابر نور  
بسته بندی نهایی: کارتون (کرافت)

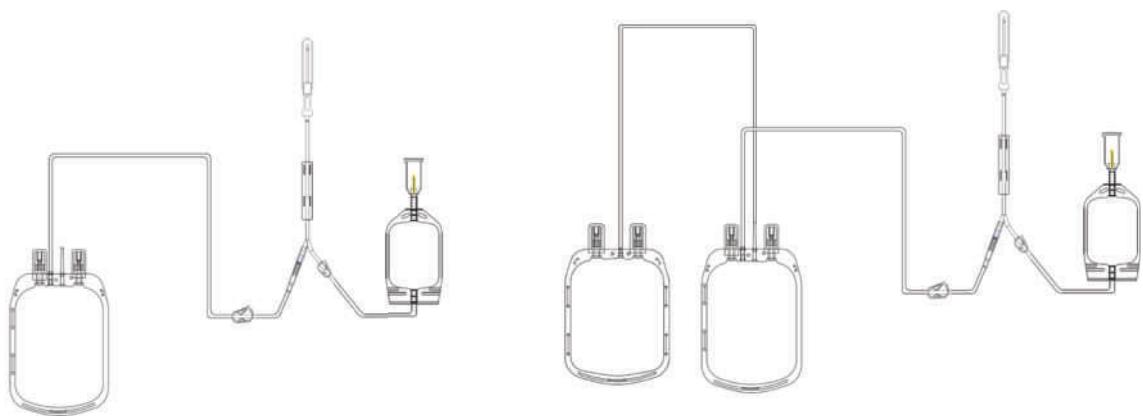


۱- ست کیسه خون تکی، CPD  
۲- ست کیسه خون تکی، CPDA-1

۱- ست کیسه خون دوتایی، CPD  
۲- ست کیسه خون دوتایی، CPDA-1

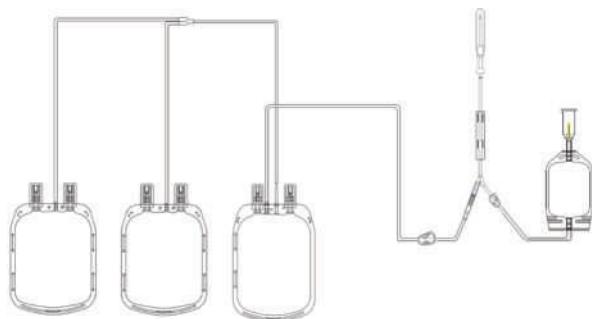

۱- ست کیسه خون سه تایی، CPD  
۲- ست کیسه خون سه تایی، CPDA-1

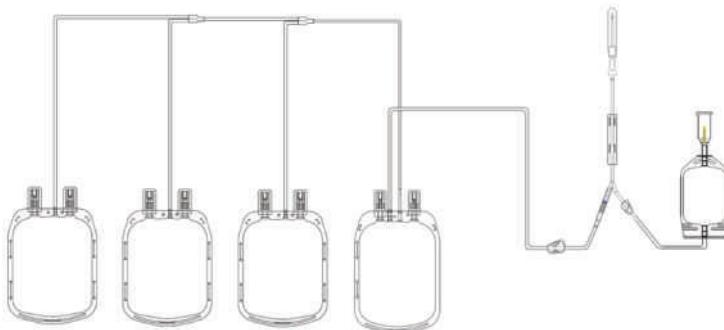

۱- کیسه خون چهارتایی، CPD  
۲- کیسه خون چهارتایی، CPDA-1

## انواع کیسه خون

انواع کیسه‌های خون ۴۵۰ میلی‌لیتر، CPD

Configuration	Product Code	Collection vol.	CPD vol.
Single Blood Bag	4512240	450 ml	63 ml
Double Blood Bag	4512265	450 ml	63 ml
Triple Blood Bag	4512230	450 ml	63 ml

انواع کیسه‌های خون ۴۵۰ میلی‌لیتر، CPDA-1

Configuration	Product Code	Collection vol.	CPDA-1 vol.
Single Blood Bag	4512250	450 ml	63 ml
Double Blood Bag	4512260	450 ml	63 ml
Triple Blood Bag	4512220	450 ml	63 ml
Quadruple Blood Bag	4512280	450 ml	63 ml

## کیسه فصد خون (Phlebotomy bag)

فصد درمانی در بیمارانی که افزایش هموگلوبین و یا افزایش تعداد گلبول های قرمز خون دارند از جمله هموکروماتوز و پلی سایتمی کاربرد دارد.

- جمع آوری خون غیر قابل استفاده
- غیررسمی و بدون عامل تب زا
- بدون نیاز به وکیوم
- استفاده از پلیمرهایی با گرید پزشکی در تمامی قطعات
- استفاده از کیسه PVC م迪کال گرید
- استفاده از کلمپ برای مسدود کردن مسیر خون در تیوب
- استفاده از سوزن بسیار تیز و روان همراه با لایه ای از سیلیکون برای کاهش درد
- دارای روکش محافظ سوزن برای پیشگیری از جراحت ناشی از سوزن در قبل و بعد از خون گیری
- بسته بندی با قابلیت باز شدن راحت توسط کاربر مطابق با استاندارد EN ISO 3826
- ۳۵ سی سی آب خالص در کیسه فصدهای استریل شده با اتوکلاو (دارای نشان CE2195)
- در تمامی محصولات کیسه فصد خون از سوزن با گیج ۱۶ استفاده می شود.

نام محصول	کد محصول	روش استریل	نوع بسته بندی
کیسه فصد خون ۳۵۰ میلی لیتری	۴۵۱۲۳۲۰	بخار ( اتوکلاو)	فیلم / فیلم
کیسه فصد خون ۴۵۰ میلی لیتری	۴۵۱۲۳۱۰	بخار ( اتوکلاو)	فیلم / فیلم
کیسه فصد خون WL ۳۵۰ - ۴۵۰ میلی لیتری	۴۵۱۲۳۳۰	اتیلن اکساید	فیلم / کاغذ م迪کال
کیسه فصد خون WL ۴۵۰ - ۴۵۰ میلی لیتری	۴۵۱۲۳۴۰	اتیلن اکساید	فیلم / کاغذ م迪کال



## هموکانسنتریشن (Hemoconcentration)

### تغليظ کننده خون رقيق شده در حین عمل های قلب باز

ست هموکانسنتریشن نوعی از تجهیزات پزشکی است که در حین عمل جراحی قلب باز به صورت یکبار مصرف استفاده می شود. استفاده از دستگاه اکسیژناتور و قلب مصنوعی در حین عمل جراحی باز مایع زیادی به بدن تحمیل می نماید. این مایعات اضافه بلافاصله بعد از پایان عمل جراحی با کمک هموکانسنتریتور و با دو روش اولترافیلتراسیون (Convection) و کانوکشن (Ultrafiltration) از بدن دفع می شود. هدف اصلی این محصول، حذف مایع اضافی و تغليظ خون است.

هموفیلتر (هموکانسنتریتور) که جزء اصلی این محصول است عبارت است از یک غشاء نیمه تراوا با الیاف توخالی که در سطح خود منافذ کوچکی دارند. گلوبول ها، پروتئین ها و گلوبولین ها از این منافذ عبور نمی کنند، اما آب، کراتینین، اوره، کلراید و قند می توانند از آن عبور کنند. به این ترتیب خون تصفیه می شود. این محصول یکبار مصرف، غیر تب زا و استریل شده با گاز اتیلن اکساید می باشد.

مشخصات فنی:

	سطح (m <sup>2</sup> )	حجم بیکننده خون (ml)	ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h)	نوع هموکانسنتریتور
فقط جهت استفاده بزرگسالان	۴۲۲۲۳۵۰	۱.۶	۸۹	هموکانسنتریشن ست ۱۶۰ های فلاکس هموکانسنتریتور پلی اتر سولفان ۱۶۰ های فلاکس
		۱.۶	۸۶	هموکانسنتریتور پلی اتر سولفان ۱۶۰ های فلاکس
فقط جهت استفاده اطفال	۴۲۲۲۳۵۵	۱.۰	۵۹	هموکانسنتریشن ست ۱۰۰ های فلاکس هموکانسنتریتور پلی اتر سولفان ۱۰۰ های فلاکس
		۳۲		



## ارائه خدمات استریل تجهیزات پزشکی:

صنایع پزشکی فارمد با تکیه بر دانش علمی و استفاده از تجهیزات مناسب قادر به ارائه سرویس استریل تجهیزات پزشکی به کمک روش استریل با گاز اتیلن اکساید و همچنین بخار به مشتریان خود است.

سرویس های استریل بنا به درخواست مشتری و متناسب با نوع محصول می تواند با گاز اتیلن اکساید و براساس روش صحه گذاری شده براساس آخرین ویرایش از استاندارد BS EN ISO 11135 و یا به روش استریل بخار و براساس آخرین ویرایش از استاندارد BS EN ISO 17665-1 انجام شود.

صنایع پزشکی فارمد با دارا بودن گواهی EN ISO 13485 برای ارائه سرویس استریل به مشتریان، متعهد به اجرای استریل استاندارد بوده و کلیه مدارک کیفی لازم را در اختیار مشتری قرار می دهد.



## خدمات پس از فروش (Sales and Customer Care)

- واحد خدمات پس از فروش طی ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته پاسخگوی مشکلات و سوالات مشتریان است.
- در سریع ترین زمان ممکن به شکایات، انتقادات و نارضایتی مشتریان پاسخ داده خواهد شد.
- در صورت مشاهده نمونه معیوب:

  - هزینه ارسال نمونه معیوب به عهده شرکت صنایع پزشکی فارمد خواهد بود.
  - در صورتی که ایراد محصول از جانب شرکت باشد محصول، جایگزین یا تعویض خواهد شد.
  - پیشنهادات و انتقادات مشتریان به شرکت کمک خواهد کرد تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد.

پورتال مشتریان

[portal.medwayteb.com](http://portal.medwayteb.com)

نشانی دفتر مرکزی:

ایران، تهران، سعادت آباد، نیش کوچه میرزا بی (پانزدهم)، پلاک ۴۴، طبقه ۱، کد پستی: ۱۹۹۸۸۳۶۷۸۵

فروش: +۹۸-۲۱-۲۲۰۷ ۴۰۰۱

نمایر: +۹۸-۲۱-۲۲۳۶ ۱۰۶۷

خدمات پس از فروش: +۹۸-۲۱-۲۲۱۴ ۳۵۰۹

(۳۳۴ ۶۸۴۹ +۹۸(۹۱۲) ۲۴ ساعته در تمام ایام هفته)

[www.medwayteb.com](http://www.medwayteb.com)

[info@medwayteb.com](mailto:info@medwayteb.com)

بازاریابی: ۰۹۱۲-۰۳۴ ۰۸۶۴

 [@medway](https://telegram.me/medway)





ICD GROUP

[www.icdgroup.org](http://www.icdgroup.org)



Meditechsys

**PHARMED**  
Medical Industries

**PHARMED PLAST**  
POUYAN

**NOVA**  
Pharmed  
Chemia

  
**Novatis**  
Teb

  
**Medway**  
Teb Pouyan


**smaRT**

  
**Medicina**  
Serum

  
**FIBRON**  
Fanavar Ideh Brondad

  
**HOMADIS**

Diversify  
your  
**Treatment**

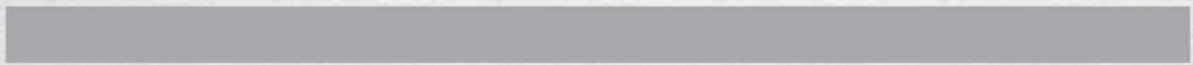

# PHARMED

Medical Industries

شرکت صنایع پزشکی فارمد

عضو کنسرسیوم دیالیز ایران

نشانی: ایران، تهران، ضلع غربی سعادتآباد، بیش کوچه میرزا بی (پانزدهم)، پلاک ۴۴، طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۹۸۸۹۸۶۳۸

تلفن: +۹۸-۲۱-۲۲۰۷ ۴۰۰۱

نمبر: +۹۸-۲۱-۲۲۰۷ ۳۱۰۲-۳

نشانی کارخانه:

ایران، شهرک صنعتی اشتهرارد، بلوار حافظ غربی، بوستان دوم، کد پستی: ۳۱۸۸۱۱۴۳۶۶

تلفن: +۹۸-۳۷۷۷ ۷۶۲۰-۲۶

[www.pharmed.co](http://www.pharmed.co)

[info@pharmed.co](mailto:info@pharmed.co)

